



HEMOCHRON® Jr. *Signature+*
Whole Blood Microcoagulation System

MİKRO-KOAGÜLASYON SİSTEMİ




KOAGÜLASYON TESTLERİNDE, TEKNOLOJİNİN GELDİĞİ SON NOKTA!

- ▶ HEMOCHRON Signature+, ACT, PT, APTT ve Anti Faktör-Xa testlerini bir damla tam kan ile, hasta başında ve laboratuvar seviyesinde doğrulukla yapmaya olanak sağlar. Hem de yalnızca birkaç dakika içerisinde...
- ▶ Son 400 kalite kontrol ve 400 kan testi sonucunu hafızasında tutar.
- ▶ Kalite kontrol testleri likit ve elektronik olarak yapılabilir.

TESTLER

HEMONOX (Anti Faktör-Xa) – Enoxaparin sodyum ve dalteparin sodyum gibi Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin (DMAH) antikoagülan etkisinin izlenmesinde kullanılır.

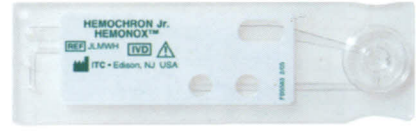

ACT-LR – Düşük dozla, orta doz (0-2.5 ünite/ml) arası uygulanan heparinin izlenmesinde kullanılır. Sonuçlar Celite® eşdeğeri olarak gösterilir.



ACT+ – Orta dozla, yüksek doz (1-6 ünite/ml) arası uygulanan heparinin izlenmesinde kullanılır. Aprotinin, hipotermi ve hemodilasyondan etkilenmez. Sonuçlar Celite® eşdeğeri olarak gösterilir.



APTT – Düşük dozlardan, 1.5 ünite/ml' ye kadar kullanılan heparine karşı oldukça hassastır. Sonuçlar 400 saniyeye kadar plazma eşdeğeri olarak gösterilir.



PT – Venöz veya parmak ucundan alınan kan ile test yapılabilir. Sonuçlar INR ve plazma eşdeğeri olarak gösterilir.



Citrate PT – PT testini sitratlı kan numunesi kullanarak yapmaya olanak sağlar. Sonuçlar INR ve plazma eşdeğeri olarak gösterilir.



Citrate APTT – APTT testini sitratlı kan numunesi kullanarak yapmaya olanak sağlar. Sonuçlar 400 saniyeye kadar plazma eşdeğeri olarak gösterilir.



www.pointmedikal.com.tr

Merkez: Kınkaslan sok. 23/2 Gazimahallesi
Yenimahalle - Ankara/Türkiye
Tel: +90 312 2111185 Faks: +90 312 2111193

Fabrika: 513. Sok. No:6 İvedik Organize Sanayi Bölgesi
Ostim - Ankara/Türkiye
Tel: +90 312 3945252 Faks: +90 312 3945222



PBRN-00005 REV A